

犬乳腺腫瘍マイクロサテライト解析

飼い主様へ



「ゲノム不安定性」を指標とした、乳腺腫瘍の悪性度判定に役立つ遺伝子検査です。

手術の前に実施できる、体に負担の少ない検査です。

ゲノム不安定性とは？

正常な細胞が分裂するとき、遺伝情報は子孫の細胞に正確にコピーされます。万が一コピーミス（遺伝子の変異）が起こっても、それを修復するメカニズムが細胞にはもともと備わっています。

しかし、がんの発生過程においてこのメカニズムが正常を保てなくなると、子孫の細胞は正常細胞とは異なる間違った遺伝情報が伝わってしまいます。これをゲノム不安定性といいます。もしもある組織で、ゲノム不安定性が起こっていることがわかれれば、その組織が腫瘍性であることの強い証拠となります。

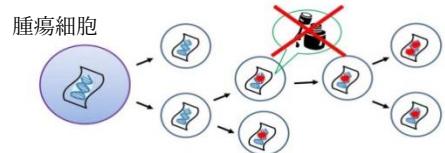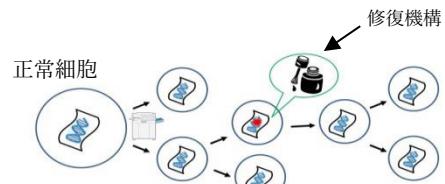

腫瘍細胞は修復系が壊れているため、遺伝子の変異（＊）が蓄積しています（ゲノム不安定性）

何を検査するの？

ゲノム不安定性の有無は、「マイクロサテライトマーカー」を調べることで判定します。検査では注射針で採取した微量の腫瘍（できもの）組織と、その個体の正常細胞（血液など）について、いくつかのマイクロサテライトマーカーを解析し、両者を比較します。

もし1つ以上のマイクロサテライトマーカーで変異が確認されれば、その組織でゲノム不安定性が起こっていることを意味し、「陽性」と判定されます。

【マイクロサテライトマーカー】


1～6塩基の繰り返しからなる特徴的な配列を持つ遺伝子領域。繰り返しの回数が個体によって異なるため、親子鑑定や個体識別にも利用される。

何がわかるの？

犬の乳腺腫瘍組織においてもこのようなゲノム不安定性が見られるケースがあることが知られていましたが、これまでの研究で、ゲノム不安定性が見られた乳腺腫瘍組織では、病理組織検査で悪性と診断される割合が高いことが明らかになりました。具体的には、病理組織検査で悪性と診断された乳腺腫瘍組織では 79.2% がゲノム不安定性が陽性であったのに対し、良性では 4.5%のみが陽性でした。


【病理組織検査】

細胞の塊（組織）を顕微鏡で観察し、悪性か良性かを判定する検査法。組織を採取するために麻酔が必要なことなど、身体的負担が若干多い

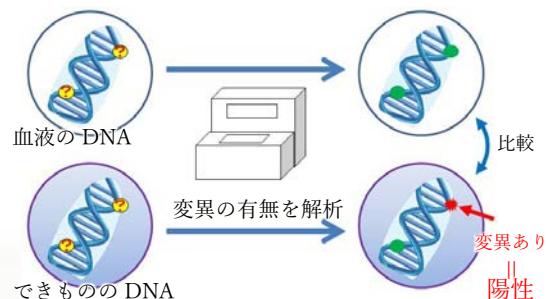

ゲノム不安定性はマイクロサテライトマーカー（？）における変異として検出されます

ゲノム不安定性陽性率


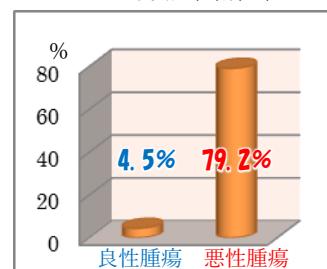


悪性の乳腺腫瘍では、高いゲノム不安定性陽性率を示します

検査結果の意味

マイクロサテライト解析を実施して陽性となった場合、その乳腺腫瘍組織は悪性である可能性が高いと言えるでしょう（特異性 95.5%）。

一方、陰性となった場合は悪性であることの根拠は得られなかったことになりますが、検出感度が8割程度であることから、悪性の可能性を完全には否定できないことに注意する必要があります。手術の適否を判断する際は、臨床症状など総合的に判断してください。

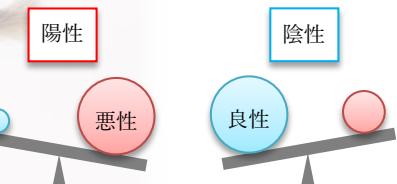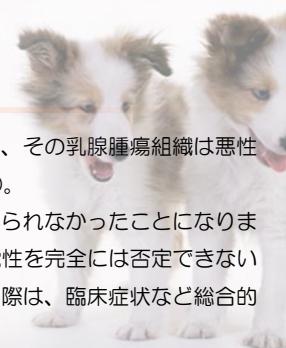

マイクロサテライト解析結果が陽性となった場合、悪性腫瘍である可能性が高くなります



有限会社
力ホテクノ

<http://www.kahotechno.co.jp/>